



GAMA PROMPT FLEX

La **gama PROMPT Flex** y sus módulos son representaciones anatómicamente precisas y diseñadas en colaboración con profesionales clínicos para facilitar el aprendizaje y la práctica de partos normales y difíciles (incluyendo la distocia de hombros) a fin de mejorar el desenlace del parto para madres y bebés.




El aprendizaje más realista posible

limbsandthings.com


PROMPT FLEX ESTÁNDAR Y AVANZADO

SON SIMULADORES INDEPENDIENTES QUE CONTIENEN UNA MADRE Y UN BEBÉ CON CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS ESENCIALES

La **madre PROMPT Flex** incluye pelvis ginecoide, canal de parto flexible, cuello uterino con dilatación, suelo pélvico flexible realista y muslos articulados.

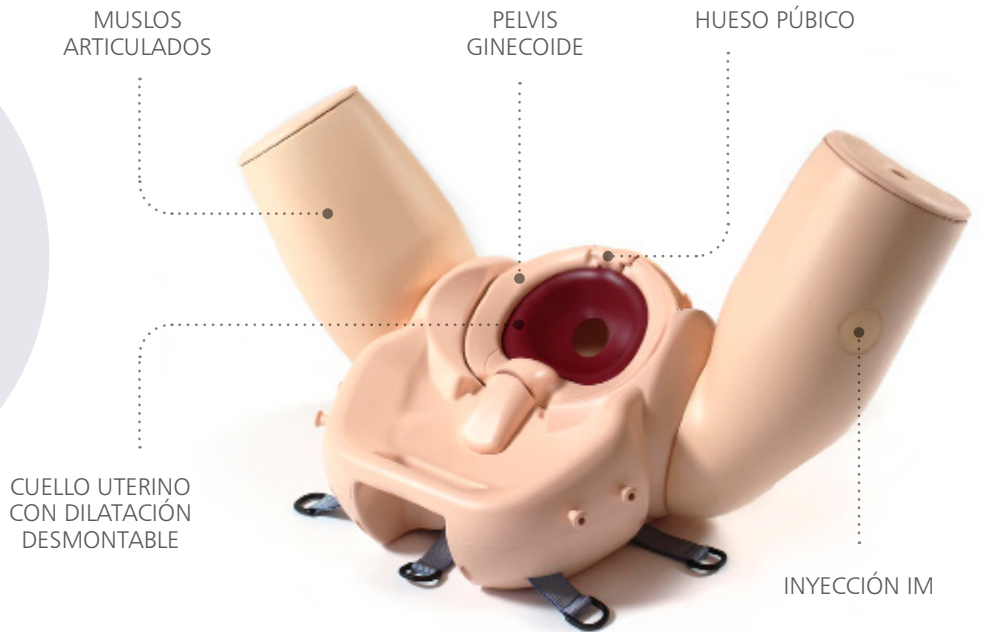

El **bebé de precisión PROMPT Flex** ofrece una amplitud de movimiento realista en las articulaciones del hombro y la cadera y flexión en la región toracolumbar.

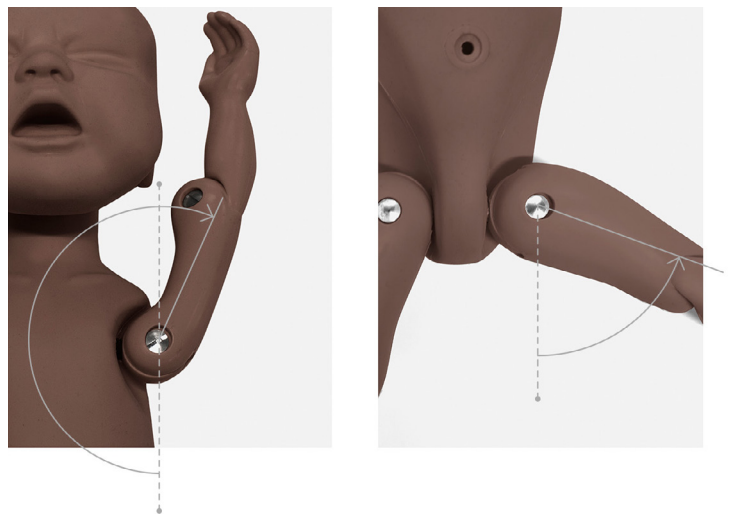

* Modelo estándar únicamente

PROMPT FLEX - ESTÁNDAR

80100

80200

Imprescindible en programas de formación para partos, el modelo PROMPT Flex Estándar es idóneo para enseñar y practicar situaciones de partos normales y difíciles.

Fácil de preparar y usar, resulta perfecto para formación en aulas y grupos de entrenamiento, incluyendo el uso con pacientes simulados. Puede utilizarse en distintas posiciones de parto, incluyendo la de Gaskin (a gatas) y la maniobra de McRoberts.



PROMPT FLEX - AVANZADO

80106

80206

Este modelo incluye las estructuras y características del modelo estándar, a las que se añade la monitorización de fuerza en el bebé, que permite medir la fuerza aplicada cuando se realizan simulacros de distocia de hombros.

El software descargable incluye tres parámetros fundamentales que se miden durante la formación: fuerza aplicada a la cabeza del bebé, intervenciones realizadas durante el parto y el tiempo que dura el parto.



TÉCNICAS

80100

80106

TÉCNICAS	80100	80106
• Aptitudes de comunicación y trabajo en equipo (SP)	✓	✓
• Normal	✓	✓
• De nalgas	✓	✓
• Gestión de la distocia de hombros	✓	✓
• Instrumental (fórceps y extractores de vacío)	✓	✓
• Expulsión de la placenta	✓	✓
• Prolapso del cordón umbilical	✓	✓
• Inserción de catéter urinario	✓	✓
• Almohadillas para inyección IM	✓	✓
• Fuerza de respuesta de la cabeza del bebé	x	✓
• Aplicación con escenarios y monitorización de la fuerza	x	✓

ELEMENTOS INCLUIDOS

80100

80106

ELEMENTOS INCLUIDOS	80100	80106
80120 Madre (+ parte superior de las piernas)	✓	✓
80121 Bebé estándar	✓	x
80122 Bebé con monitorización de fuerza inalámbrica	x	✓
80123 Placenta	✓	✓
80124 Abdomen para PROMPT Flex	✓	✓
80125 Perineo y canal de parto	✓	✓
80130 Correas de sujeción	✓	✓
10193 Lubricante	✓	✓
01000 Maletín de transporte con ruedas	✓	✓

* Tableta no incluida

EL **DISEÑO MODULAR** DE ESTA GAMA OFRECE MÁXIMA FLEXIBILIDAD, YA QUE PERMITE INCORPORAR PROCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA ADAPTARSE A LAS TÉCNICAS QUE DEBEN APRENDERSE.
AHORA DISPONIBLE EN **DOS TONOS DE PIEL DISTINTOS**

MÓDULOS ADICIONALES SON VÁLIDOS PARA AMBOS SIMULADORES, ESTÁNDAR Y AVANZADO

PROMPT FLEX - MÓDULO DE CERLAJE CERVICAL


80180

80280



NUEVO

Este módulo permite a los estudiantes de obstetricia aprender las técnicas de cerclaje cervical electivo y de emergencia.



El diseño es fácil de usar, y ofrece un movimiento realista del cuello uterino hacia la cúpula vaginal, que permite a los estudiantes realizar el cerclaje tan arriba del cuello uterino como sea posible, conforme a la técnica de McDonald.

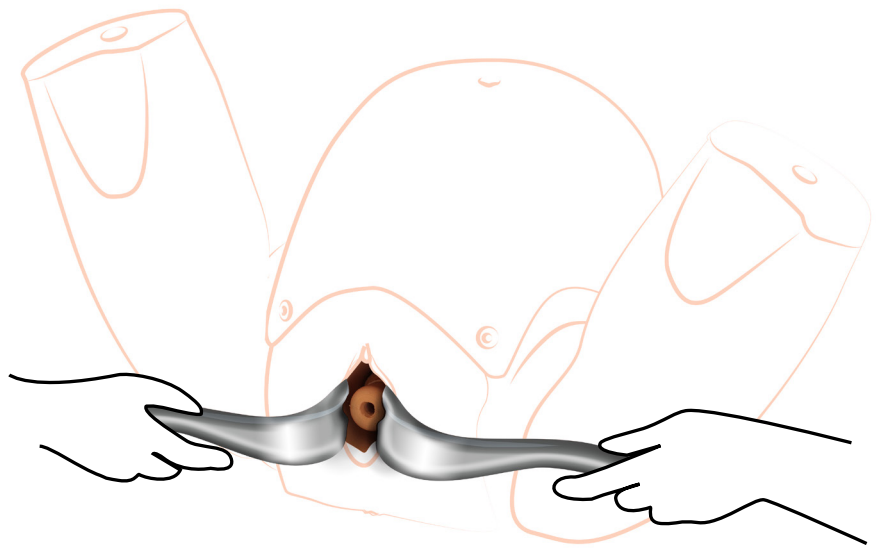

ELECTIVO

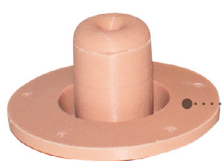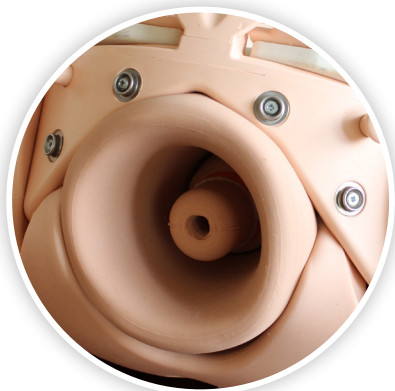

EMERGENCIA

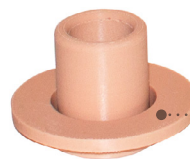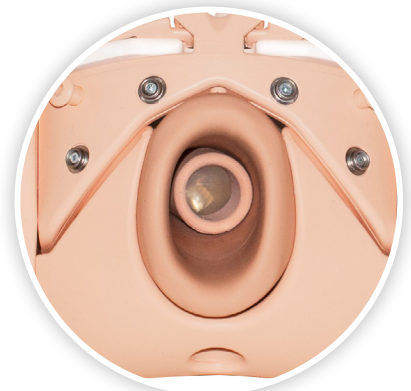

PROMPT FLEX - MÓDULO DE DILATACIÓN Y BORRAMIENTO DEL CUELLO UTERINO

80102

80202

Simulador completo para evaluar y valorar la dilatación del cuello uterino en las etapas latentes y activas del parto.


Para un aprendizaje completo, se han diseñado 6 cuellos uterinos intercambiables (de entre 1 y 10 cm) y membranas amnióticas que ofrecen una representación realista de la dilatación y el borramiento del cuello uterino.



ESTACIÓN FETAL
(DE -3 A +3)



DILATACIÓN DEL CUELLO
UTERINO (1-10 CM)

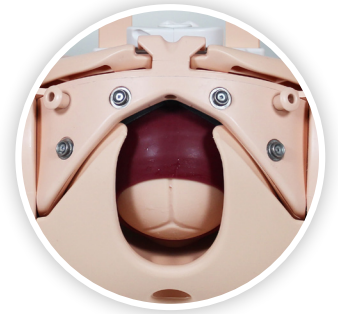

PROMPT FLEX - MÓDULO DE CESÁREA

80103

80203

El módulo de cesárea PROMPT Flex permite aprender y practicar repetidamente partos por cesárea rutinarios y complicados, incluyendo los de cabeza impactada y posición transversal para los que se usa piel con incisión y útero ajustable.

Para aprender a realizar una incisión de cesárea, las almohadillas anatómicamente precisas permiten practicar una incisión transversal (con la técnica de Joel-Cohen o la de Pfannensti) y la sutura correspondiente.

ABDOMEN CON INCISIÓN



ALMOHADILLA QUIRÚRGICA




REPARACIÓN PERINEAL Y EPISIOTOMÍA PUEDE UTILIZARSE COMO SIMULADOR AUTÓNOMO O EN COMBINACIÓN CON PROMPT FLEX

Este modelo polifacético permite a los estudiantes aprender a realizar una reparación perineal. Se trata de una base común para: un bloque de reparación del esfínter anal y una selección de dos bloques de reparación perineal distintos para adaptarse a las diferentes áreas geográficas. El bloque sin incisión es una opción adicional para adaptarse a requisitos de formación específicos.

Los puntos de referencia esenciales son claramente visibles para poder identificar la gravedad del desgarro. El esfínter anal externo retráctil obliga a los estudiantes a identificar y diseccionar las capas musculares.

NUEVO


BLOQUE SIN INCISIÓN

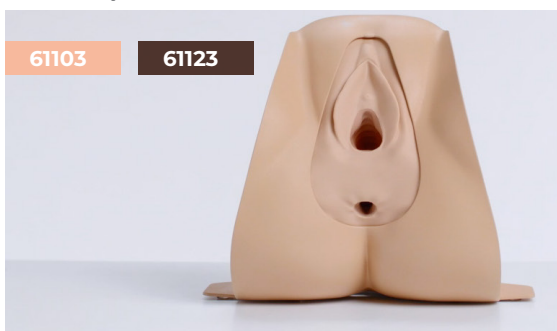

61103

61123

CENTRAL

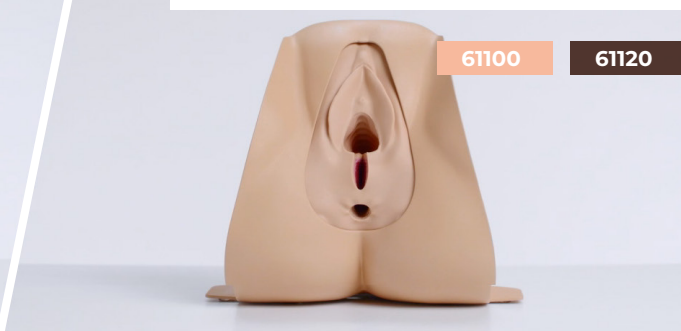

61100

61120

MEDIOLATERAL



61101

61121

ESFÍNTER ANAL



61102

61122



PAQUETE DE ILUSTRACIONES




MÓDULO SIMULADOR DE EPISIOTOMÍA

61104

61124

Este asequible modelo está diseñado para usarlo con el simulador de reparación perineal en un aula a fin de adquirir confianza en la práctica de la episiotomía.

Es un modelo para formación continuada, que incluye un paquete de ilustraciones para ayudar a los estudiantes a adquirir confianza en la práctica de este procedimiento.

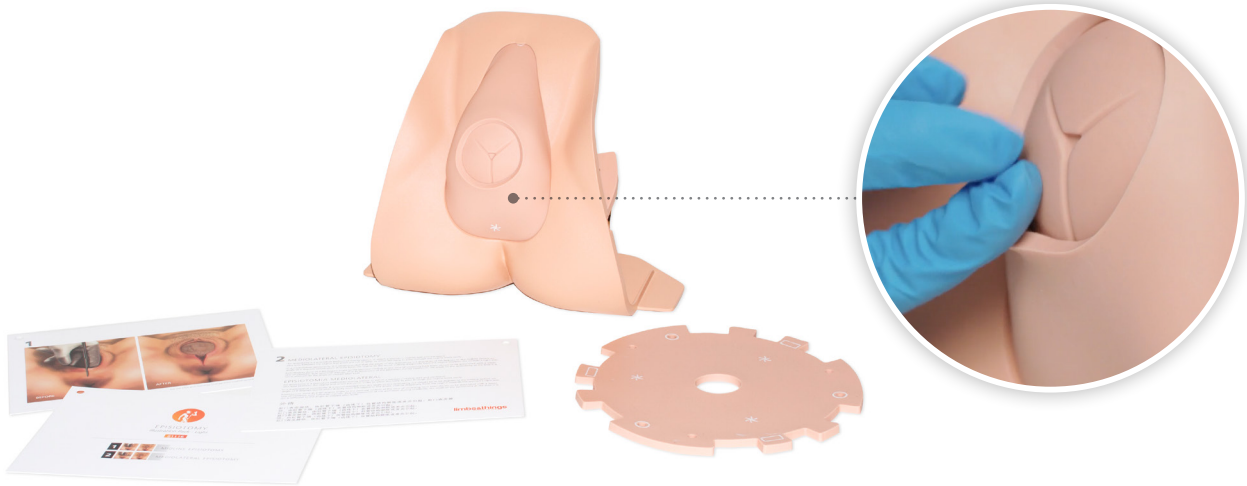


PROMPT FLEX - MÓDULO DE HEMORRAGIA PUERPERAL

80101

80201

Este módulo simula un útero relajado y contraído para practicar las técnicas de tratamiento de la hemorragia puerperal.

El flujo sanguíneo y la pérdida de sangre simulados transmiten a los estudiantes una sensación real de urgencia en unas condiciones de formación realistas.

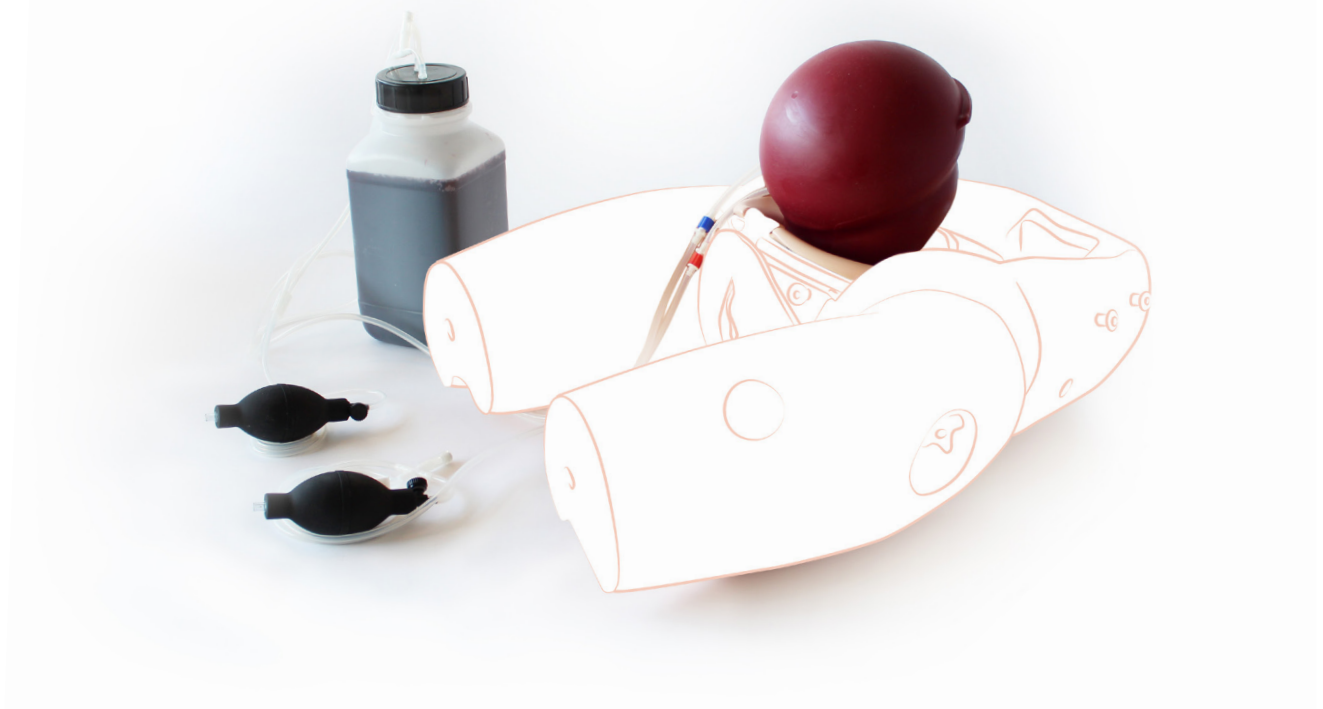


PROMPT FLEX - ÚTERO PARA SUTURA DE COMPRESIÓN

80111

Módulo fácil de preparar que contiene la anatomía necesaria para que los estudiantes puedan practicar la sutura de compresión uterina y la ligadura de arterias uterinas.

Si se usa en combinación con la piel con incisión **80171 / 80271**, es el método de formación idóneo para practicar repetidamente la sutura de compresión uterina.

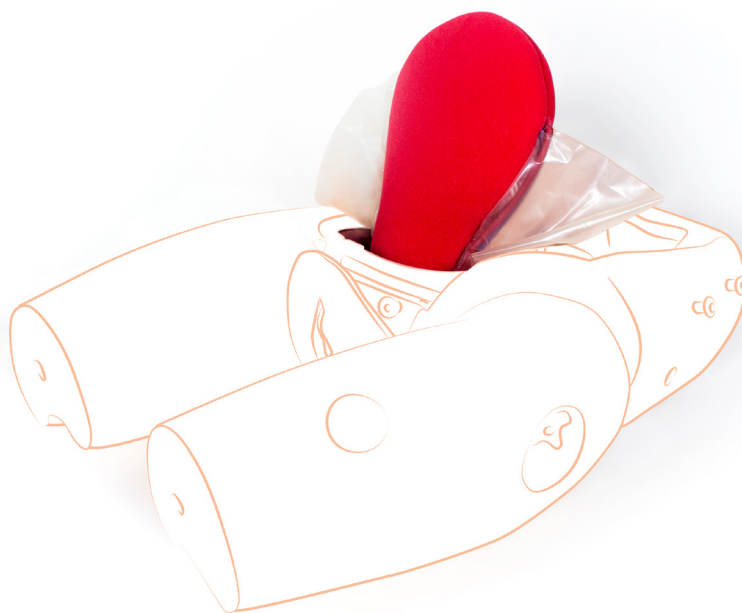

Los informes existentes indican los resultados siguientes cuando se utiliza PROMPT en combinación con programas de capacitación profesional eficaces:



- Una reducción del 50 % en lesiones cerebrales
- Una reducción del 45 % en la parálisis cerebral a partir de la edad escolar
- Reducción de la mortalidad materna

Fuente: <https://www.promptmaternity.org/publications>



PROMPT Flex es apto para uso en programas de formación obstétrica, entre ellos:

ACOG Course – ECO (Emergencies in Clinical Obstetrics)	MORE OB (Managing Obstetric Risks Efficiently)
ALARM (Advances in Labor and Risk Management) - Canada	PROMPT (PRactical Obstetric Multi Professional Training)
ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics)	PRONTO International
BEOC (Basic Essential Obstetric Care)	REOT (Rural Emergency Obstetrics Training)
BLSO (Basic Life Support in Obstetrics)	ROBUST (RCOG Operative Birthing Simulation Training)
Care Team OB (American Academy of Family Physicians)	SCOTTIE (Scottish Core Obstetric Teaching and Training In Emergencies)
CEOC (Comprehensive Essential Obstetric Care)	TeamSTEPPS (Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety)
MOET (Managing Obstetric Emergencies and Trauma)	